

MPT-4

歯科用タイマー Mizni[®] (ミズニー)

取扱説明書・保証書

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。
お読みになった後は、いつでも見られるように大切に保管してください。

〈保証規定〉

- 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常なご使用状態で故障した場合は本書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
※誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地変等や異常電圧などの外部要因等による故障または損傷。
※ご使用上に生じる外観の変化。
※本書に販売店、およびお買い上げ年月日の記載がない場合、字句を書き換えられた場合。
※本書のご提示がない場合。
※本品の本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷。
- 電池は保証対象外です。
- 有料修理の場合は、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。
この保証書によって、保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 安全上のご注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切の責任を負いません。

＜製造／開発・販売元＞
輸入元：株式会社ドリテック
企画開発および販売元：合同会社エム・プラス
問い合わせ先：合同会社エム・プラス
連絡先電話：082-225-8338
メールアドレス：mplus9977.5@gmail.com
商品紹介サイト URL：https://www.m-pls.com/mizni

安全上のご注意

- 必ずご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する内容ですので、必ずお守りください。

⊘ 禁止	してはいけない内容	ⓘ 指示	実行しなければならない内容
⚠ 警 告			
⊘ 禁止	●絶対に分解・修理・改造をしない。 →発火・感電・けがの原因になります。 ●乳幼児や自分で操作ができない人、補助を必要とする人、取り扱いに不慣れな人だけで使用させたり、手の届くところに置いたりしない。 →誤飲・けがの可能性あります。 ●万一電池や部品を飲み込んだ場合は直ちに医師に相談する。		
ⓘ 指示	●異常・故障がある場合には直ちに使用を中止し、点検・修理を依頼する。 →発火・けがの可能性あります。		

⚠ 注 意	
→故障や誤作動、本体の変形・変色の原因になります。	
⊘ 禁止	●落としたり、ぶつけたりなど強い衝撃を与えない。 ●防水・防滴構造ではないため、湿気の多い場所や水のかかる場所で保管・使用はしない。 ●湿気や磁気の多い場所に置かない。 ●ストーブの近くや高温になる場所、直射日光の当たるところに放置しない。 ●本体を直接火に当てたり、火の近くに置かない。 ●ペンジンやシンナーなどの溶剤や薬液、熱湯などにつけたり、かけたりしない。
ⓘ 指示	●静電気や電磁波を発する機器の近くでの使用は控える。故障や誤作動の原因になります。

⚠ 電池について	
●ショートさせない。分解・加熱をしない。火中に投じない。 ●電池の液が皮膚や衣服に付着したらきれいな水で洗い流し、目に入ったときはすぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受ける。 ●電池は乳幼児の手の届く場所に置かない。万一飲み込んだ場合は直ちに医師の治療を受ける。 ●電池の極性(＋・－)を正しく入れる。 ●電池を使い切ったときや長期間使用しないときは、電池を取り出す。 ●電池を廃棄するときは、自治体の指示に従う。 ●使用・保管時に電池の発熱や変形など今までと異なることに気づいたときは使用を中止する。	

アフターサービスについて

保証期間：お買い上げ日から1年間

修理やお取扱いのご相談は、まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

1.製品の保証について

- この説明書には製品の保証書がついています。保証書は、お買い上げの販売店で「お買い上げ日」「販売店名」などの記入を受け、ご確認の上内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。
- 保証期間中でも有料となる場合がありますのでく保証規定>をよくお読みください。
- 当社修理技術者以外の人が分解・修理した場合は保証対象外となります。

2.修理を依頼されるとき

- 「故障かな?と思ったら」をご確認いただいても異常のあるときはご使用を中止し、修理をご依頼ください。
- 保証期間中は、製品に保証書を添えてお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
なお、製品修理以外の責任はご容赦ください。
- 保証期間が過ぎているときは、当社問い合わせ先までご相談ください。修理によって使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますのでご了承ください。また、法令の定めのある場合を除き、事前の同意をいただくことなく上記目的以外には使用いたしません。

〈保証書〉

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。
本製品の修理は本保証書をご準備の上、当社問い合わせ先まで修理をご依頼ください。

品 番	MPT-4
保証期間	お買い上げ日より 1 年間
お買い上げ日	年 月 日
お 客 様	お名前
	ご住所 お電話
販 売 店*	販売店名
	ご住所 お電話

販売店様へ：*欄は必ず記入してお渡しく下さい。
※製品の仕様は改良などのため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

故障かな?と思ったら


- 電源が入らない
 - ・電池が消耗していませんか?
 - ・電池の極性(＋・－)は正しいですか?
- 表示が薄くなる
 - ・電池が消耗しています。新しい電池に交換してください。
- 音が鳴らない・音が小さい・音が大さい
 - ・音量調整ネジを確認してください。
- 正常に動作しない
 - ・電池を取り出して、もう一度入れなおしてください。

仕様

品番 / 品名	MPT-4 / 歯科用タイマーMizni
表示方法	LEDセグメントタイプ緑色 4桁
アラーム 鳴動時間	通常モード：2秒 ロングモード(ランプ点灯時)：8秒
時間設定ボタン	10秒,15秒,20秒,30秒,1分,1分30秒,2分,3分,4分,5分 カスタム時間設定ボタン：2個(カスタム1、カスタム2) 秒単位で設定可能、最大60分まで
アラーム音量	0～80dB(無段階ダイヤル式)
電源	DC4.5V(単4形乾電池×3本) ※マンガン〇、アルカリ〇、充電式×
電池寿命	約1年 (通常モードで1日10回使用した場合)
使用環境 温度範囲	0度～40度
寸法	約 幅92×奥行67×高さ30mm
重量	約 102g
主な材質	ケース：ABS樹脂 パネル：PC樹脂 裏足ゴム足：シリコン樹脂
付属品	お試用電池 保証書付き取扱説明書

各部の名称

※本書に記載されているイラストはイメージです。

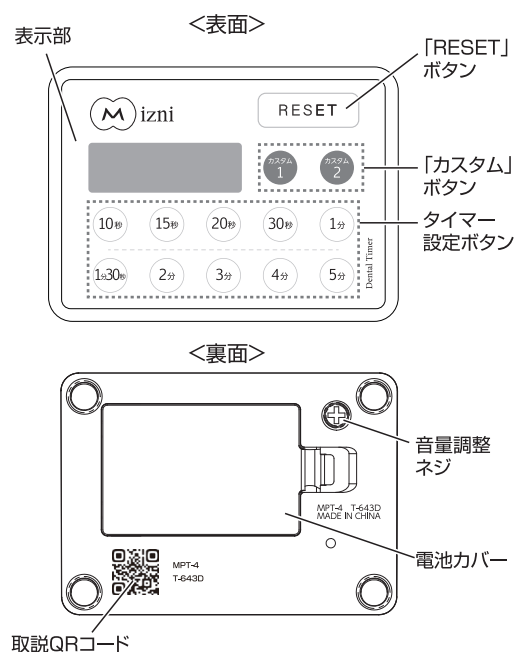

電池を交換する

※使用電池：単4形乾電池×3個


※付属の電池は動作確認用ですので、電池寿命は短かったり、電池残量が不足している場合があります。
※カバーを外す際は、怪我をしないように気をつけてください。
※充電式はご使用できません。

- 1.裏面の電池カバーのツメを上げて取りはずす。
- 2.電池の極性(+・-)をご確認いただき正しくセットしてください。

アラームの音量調整

裏面の「音量調整ネジ」で、アラームの音量を「0dB(無)～80dB」まで調整することができます。

※クリニックの環境に応じてご自由に設定できます。

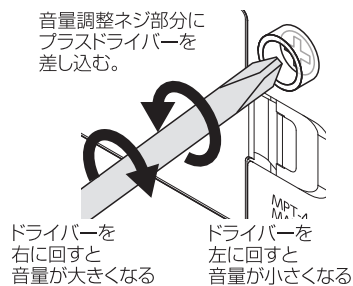

カスタム時間を設定する


- 自由に測定時間を設定できる
「カスタムボタン」が2個あります。

＜設定例＞「カスタム1」に2分30秒を設定して使う。

- ①「RESET」ボタンを押しながら「カスタム1」ボタンを押して、設定モードにする。



- ②「カスタム1」ボタンを押して、設定したい「分」で止める。

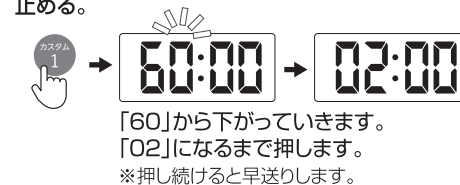

- ③「カスタム2」ボタンを押して、設定したい「秒」で止める。



- ④「RESET」ボタンを押して確定する。



- ⑤「カスタム1」ボタンを押して、設定した時間で計測がスタートするか確認する

※以降は、「カスタム」ボタンを押すと設定した時間で、タイマー設定時間と同じ操作で計測できます。
※「カスタム2」ボタンに設定するには、上記①で「カスタム2」ボタンを押してください。その後はすべて同じ操作となります。
※カスタムボタンの時間設定は、電池を入れ替えると初期状態に戻ります。その際はお手数ですが、再度設定しなおしてください。

時間を計測する

- 通常モード（ブザー音 2秒間）

＜設定例＞3分を測定する

- 「タイマーボタン」を押すと自動的に計測がスタートします。
- 残り時間がカウントダウン表示されます。
- 計測時間が終了するとブザーが鳴り、自動的に停止します。




- ロングモード（ブザー音 8秒間）

※チェアサイドを離れる際に便利です。

＜設定例＞3分を測定する

- 「タイマーボタン」を長押しします。
- 自動的に計測がスタートし、秒の右下に「.」が点灯します。
- 計測時間が終了すると8秒間ブザーが鳴り、自動的に停止します。

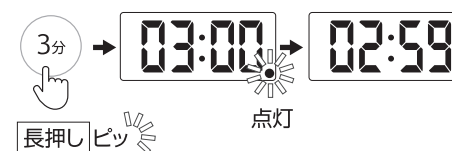

計測を途中でやめたいとき

- 「リセットボタン」を押します。
- 初期状態に戻ります。
- 一時停止や再開はできません。



製品の詳細はこちら



How to use

- Use as a regular timer.

- 1.When you press the timer button, measurement starts automatically.
- 2.The remaining time is counted down.
- 3.When the measurement time ends, the buzzer sounds.
- 4.The buzzer sound is for 2 seconds (default).
- 5.After that, the buzzer will stop automatically

- Set the buzzer sound to 8 seconds (long mode)

- 1.Press and hold the timer button.
- 2.Measurement starts automatically, and "." is displayed in the lower right corner of the second, lights up.
- 3.When the measurement time ends, the buzzer sounds.
- 4.The buzzer will deep for 8 seconds and then auto-stop.

- How to stop measuring in the middle

- 1.Press the reset button.
- 2.Return to the initial state
- 3.It cannot be paused or resumed.

- Using the Customize Button

- 1."RESET" button and "Custom 1" button press at the same time to enter setting mode.
- 2.Press the "Custom 1" button and stop at the "minute" you want to set.
Each time the "minute" display is pressed, the display counts down.
- 3.Press the "Custom 2" button and stop at the "second" you want to set.
Each time the "seconds" display is pressed, the display counts down.
- 4.Press the "RESET" button to confirm.
The display flashes and then turns off.
- 5.Press the "Custom 1" button to measure at the set time.
- 6.Confirm that you want to start.
- 7.To set the "Custom 2" button, press the "Custom 2" button, and do the same as the contents of No.2 above. After that, everything is the same.
- 8.The custom button will return to its initial state when the battery is replaced. In that case, we apologize for the inconvenience, but please set it up again.